

Системы контроля работы температурной техники


Системы сбора и документирования температурных данных

Системы обеспечивают регистрацию температуры и влажности внутри камер холодильников, морозильников, термостатов, сухожаров и в окружающей среде в режиме on-line. Данные передаются от зонда, установленного внутри камеры на базу, которая фиксирует все данные в ПК; точность измерения в диапазоне от -25 до $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$ — $\pm 0,4\text{ }^{\circ}\text{C}$; память для длительного хранения данных; запись, сохранение и обработка данных с помощью ПО. Возможна установка проводных и беспроводных передатчиков.



GSM-оповещатель


GSM-оповещатель известит вас о неисправности оборудования в лаборатории. Работает с оборудованием, поддерживающим определенную температуру: термостаты, сухожары, печи, холодильники, морозильники, климатические камеры, инкубаторы*, независимо от рабочей температуры, т.к. не имеет своего зонда, а подключается к штатной системе сигнализации. В случае неисправностей оборудования, при которых срабатывает штатная система сигнализации (отклонение температуры от заданного значения, отключение электропитания, оставленная открытая дверь и т.п.), **GSM-оповещатель** отправит вам **SMS сообщение** на указанный вами номер мобильного телефона. **GSM-оповещатель** имеет 4 входа и может обслуживать одновременно 4 аппарата. Для работы устройства требуется оплаченная СИМ-карта и электропитание. Подключение и настройка не требуют выезда сервисного инженера.

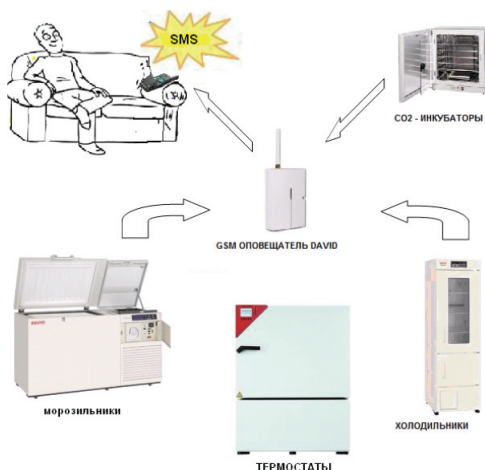

* Работа оповещателя проверена с оборудованием Sanyo, Binder, Liebherr. О совместимости извещателя с оборудованием других марок уточняйте у специалистов **Диаэм**.

GSM-оповещатель 11700,00 руб.

Штатив CoolCell для криоаморозки 1 °С/мин

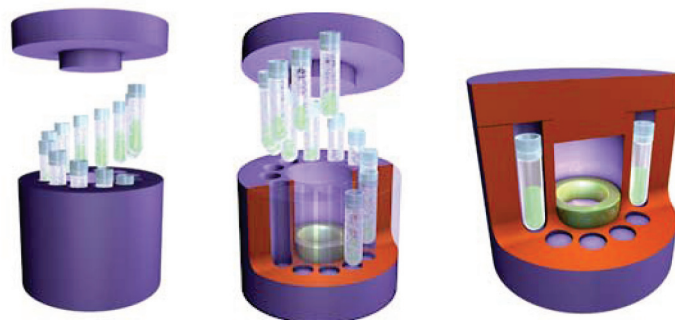

Штатив **CoolCell** обеспечивает фиксированную скорость снижения температуры – 1 °С в мин без использования каких-либо растворителей. Сердечник из специального сплава и плотный вспененный полиэтилен, из которого изготовлен штатив, поддерживают постоянную скорость замораживания. Штатив **CoolCell** бывает трёх цветов — зелёный, фиолетовый, оранжевый.

Контейнеры **CoolBox** из вспененного полиэтилена, штатив-охладитель **CoolRack** и температурный картридж поддерживают необходимую температуру образцов «в сухую»:

- +2 °С в течение 10 часов — синие картриджи;
- 12 °С в течение 6 часов — зеленые картриджи.



Штатив CoolCell для криоаморозки 1 °С/мин 130,00 евро
 Штатив CoolCell + CoolBox + штатив-охладитель CoolRack + картриджи 685,00 евро

Стерилизатор микробиологических петель SteriMax

SteriMax — электрический стерилизатор для обработки микробиологических петель, шпателей, скальпелей. Внутренняя керамическая и кварцевая трубки **SteriMax** обеспечивают равномерный прогрев по всей длине до 950 °С; пожаробезопасен (не является источником открытого пламени); время стерилизации — 5 – 7 сек; две модели: **SteriMax 15** и **SteriMax 20**, диаметр отверстия — 15 и 20 мм, максимальная длина стерилизуемого инструмента — 118 и 161 мм, соответственно.



Стерилизатор микробиологических петель SteriMax 15, d15 мм 569,00 евро
 Стерилизатор микробиологических петель SteriMax 20, d20 мм 629,00 евро